

# Más

MEDICAL- AESTHETIC SYSTEMS

MaS Medical estudia, selecciona y pone al alcance de facultativos y pacientes las tecnologías más avanzadas y novedosas en los campos de la fototerapia, aplicación láser y medicina estética.

Nuestro trabajo de investigación es continuo, tanto en las áreas académica y médica como en los últimos avances tecnológicos a nivel internacional. Tras exhaustivos estudios certificados, seleccionamos aquellos equipos garantes de resultados sobresalientes y establecemos acuerdos de distribución con aquellos fabricantes y marcas que nos acreditan estos resultados.

Nuestro objetivo es la excelencia para ser un partner en el que pueda confiar siempre.

mas-med@mas-med.es

www.mas-med.es

Pº Eztegarra, 28 - 31780 Bera, Navarra

+34 948 631 538

# Más

MEDICAL- AESTHETIC SYSTEMS

DEPILACIÓN INDOLORA

## COOLITE BOLT TRI WAVE

COOLITE BOLT TRI-WAVE  
combina 3 longitudes de onda láser  
en una innovadora pieza de mano independiente  
que se focaliza simultáneamente  
en diferentes profundidades y estructuras  
anatómicas del folículo piloso.

# COOLITE BOLT TRI WAVE

## LA DEPILACIÓN INDOLORA MÁS EFICAZ

### LÁSER TRI-WAVE

Combina los beneficios de 3 longitudes de onda, logrando resultados excelentes incomparables a los de cualquier láser de longitud de onda simple.

Los beneficios sinérgicos de las 3 longitudes de onda más eficaces para la depilación.

Cada una de ellas se centra en estructuras diferentes dentro del folículo piloso. Los 3 objetivos anatómicos principales incluyen la protuberancia, el bulbo y la papila folicular.



### MÚLTIPLES MODOS SHR – DINÁMICO – ESTÁTICO

SHR trabaja calentando gradualmente la dermis hasta alcanzar la temperatura necesaria para dañar eficazmente los folículos pilosos y prevenir el nuevo crecimiento de pelo. Obtiene un tratamiento indoloro además de poder trabajar pieles bronceadas evitando quemaduras superficiales.

### INCLUYE LECTOR FOTOTIPO PIEL

Una lectura por parte del lector de concentración de melanina en la piel junto con un software inteligente, permiten que el equipo se auto-programe para una sesión SEGURA Y EFICAZ.



# RAZONES PARA ELEGIR COOLITE BOLT TRI WAVE

### TECNOLOGÍA TRI-WAVE

Toda la energía es absorbida sin pérdidas y por tanto la eficacia es absoluta. No existe calentamiento del equipo.

### PULSOS ULTRACORTOS

COOLITE entrega la energía en pulsos ultra cortos que fulminan las células germinativas sin llegar a calentar la piel.

### MANÍPULO ULTRALIGERO Y SIEMPRE FRÍO

El manípulo más ligero del mercado con un potente sistema de refrigeración para una depilación confortable.

### MÁS RÁPIDO

Reduce el tiempo de tratamiento en más de un 80% y reduce al mínimo las molestias de tratamiento.

Jose Ma Irazoqui  
Responsable Sijou España  
Especialista láseres médicos.




"La experiencia de 25 años en el sector del láser médico de depilación, nos permiten afirmar que COOLITE BOLT TRI-WAVE supone el mayor avance en el sector de la depilación con la tecnología TRI-BANDA de alta potencia. Ya podemos trabajar todo tipo de pieles de forma segura, con menos dolor y máxima eficiencia en el tratamiento. Eficacia superior a cualquier nivel de profundidad, al trabajar conjuntamente con 3 longitudes de onda láser diferentes: Alejandrita + Diodo + Nd:Yag. Hemos dotado de tres sistemas de trabajo In-Move, SHR Dinámico y estático que permiten el trabajo de todo tipo de vello. Resultados Clínicamente probados. Estamos ante la plataforma láser depilación más innovadora del mercado actual".



ALEJANDRITA 755nm

Gracias a la longitud de onda del alejandrita, obtenemos una mayor absorción de energía por el cromóforo melanina. Especialmente diseñado para el pelo claro, cano y superficial. Asimismo esta se centra en la protuberancia del folículo piloso.

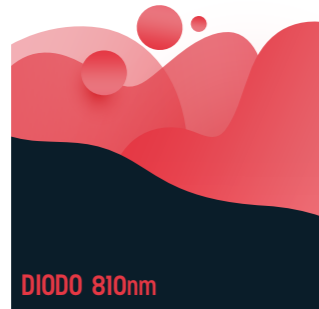

DIODO 810nm

La longitud de onda de 810nm ofrece una penetración profunda centrándose en la protuberancia y el bulbo del folículo piloso, siendo altamente segura para los fototipos más oscuros de piel gracias a una absorción más moderada por el cromóforo melanina.



ND.YAG 1064nm

Se caracteriza por una menor absorción de melanina, siendo una solución específica para los fototipos de piel más oscuros. La longitud de onda de 1064nm ofrece la mayor penetración del folículo piloso, permitiendo centrarse en el bulbo y la papila. Asimismo incrementando la temperatura del agua y en definitiva la de la depilación para la obtención de mayor efectividad.

## DESCUBRE LA DEPILACIÓN MÁS RÁPIDA DEL MERCADO

Un spot de 15 x 10, así como la posibilidad de trabajar de 1 a 10hz a máxima potencia, nos permiten tiempos de tratamiento muy bajos.

CARACTERÍSTICAS	COOLITE	ALEXANDRITE	Nd YAG	IPL
Piernas enteras	17 min	180 min	180 min	90 min
Espalda	7 min	120 min	120 min	50 min
Brazos	7 min	40 min	40 min	20 min

